

Πρόληψη διαταραχών του στομάχου

Γρήγορη εξέταση για ανίχνευση του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού

Κίνδυνος για το στομάχι: το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

Οι επώδυνες φλεγμονές του βλεννογόνου του στομάχου με ναυτία και άλγος οφείλονται συχνά στον αποικισμό του στομάχου από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Περαιτέρω συνέπειες ενδέχεται να είναι χρόνιες φλεγμονές του βλεννογόνου του στομάχου (γαστρίτιδα) ή ακόμη και γαστρικό έλκος. Εκτός αυτού, το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού συνδέεται με παθήσεις, όπως ο καρκίνος του στομάχου και των λεμφαδένων.

Περιγραφή εξέτασης: Γρήγορη εξέταση για την πρόληψη διαταραχών του στομάχου

Με τη γρήγορη εξέταση για την πρόληψη διαταραχών του στομάχου μπορείτε να διαπιστώσετε με γρήγορο και απλό τρόπο, αν είστε φορέας του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού. Εάν συμβαίνει αυτό, μπορείτε να συζητήσετε την περαιτέρω πορεία με τον ιατρό σας.

Πόσο αξιόπιστη είναι η εξέταση Veroval®;

Η γρήγορη εξέταση για την πρόληψη διαταραχών του στομάχου σχεδιάστηκε με στόχο να καταστεί διαθέσιμη η ακρίβεια και η ασφάλεια της σύγχρονης διαγνωστικής και για τη χρήση κατ' οίκον. Βασίζεται στον ανοσολογικό προσδιορισμό αντισωμάτων κατά του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού στο αίμα. **Η ακρίβεια πιστοποιείται με μελέτες αξιολόγησης της απόδοσης και υπερβαίνει το 96 %.**

Είναι πολύπλοκη η διεξαγωγή της εξέτασης;

Όχι: Το μόνο που χρειάζεστε είναι καθαρά, πλυμένα χέρια, ένα ρολόι και μια επίπεδη επιφάνεια τραπεζιού. Η ακριβής διαδικασία εξέτασης περιγράφεται στο οπισθόφυλλο. Για τον τρόπο προσδιορισμού και αξιολόγησης του αποτελέσματος πρέπει να μελετήσετε επιμελώς τις οδηγίες χρήσης. Πρέπει να έχετε κατανοήσει όλες τις λεπτομέρειες πριν από τη διεξαγωγή της εξέτασης.

Σημαντικές πληροφορίες:

Τα θετικά αποτελέσματα εξέτασης ενδέχεται να έχουν εντελώς ακίνδυνες αιτίες – αντίθετα, τα αρνητικά αποτελέσματα συνεπάγονται πάντοτε την απόλυτη απουσία κινδύνου. Η οριστική διάγνωση θα πρέπει να γίνει από ιατρό. Για την έγκαιρη αναγνώριση νέων κινδύνων, συνιστάται να επαναλαμβάνετε τακτικά την αυτοεξέταση για την πρόληψη γαστρεντερικών διαταραχών.

10 min



Ακρίβεια > 96 %



Στοιχεία απόδοσης:

	Εξέταση αναφοράς			
	Θετικό αποτέλεσμα	Αρνητικό αποτέλεσμα	Σύνολο	
Πρόληψη διαταραχών του στομάχου Γρήγορη εξέταση	Θετικό αποτέλεσμα	63	2	65
	Αρνητικό αποτέλεσμα	4	86	90
	Σύνολο	67	88	155

Ευσαιθησία: 94,03 % Ειδικότητα: 97,73 % Ακρίβεια: 96,92 %

Τι πρέπει να προσέξω;

Προειδοποιήσεις και σημαντικές οδηγίες:

- Η εξέταση προορίζεται αποκλειστικά για εξωτερική χρήση.
- Μην καταπίνετε κανένα από τα στοιχεία της εξέτασης. Αποφύγετε την επαφή του ρυθμιστικού διαλύματος αραιώσης δείγματος με το δέρμα και τα μάτια.
- Φυλάσσετε την εξέταση σε μέρος όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά.
- Μην εκθέτετε την εξέταση σε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία ή σε παγετό. Μην καταψύχετε. Φυλάσσετε σε ξηρό μέρος, σε θερμοκρασία μεταξύ 10 °C και 27 °C.
- Το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο έως την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.
- Εάν δεν τηρηθούν λεπτομερώς όλες οι οδηγίες χρήσης, ενδέχεται να προκύψουν αλλοιωμένα αποτελέσματα εξέτασης.
- Μη χρησιμοποιήσετε την εξέταση, εάν η συσκευασία παρουσιάζει φθορές. Μη χρησιμοποιήσετε τυχόν ελαττωματικά στοιχεία της εξέτασης.
- Σε σπάνιες περιπτώσεις ενδέχεται να προκύψουν ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα εξέτασης*.
- Όλα τα στοιχεία της εξέτασης προορίζονται αποκλειστικά για χρήση για τη συγκεκριμένη εξέταση. Μη χρησιμοποιήσετε ξανά την εξέταση μετά τη χρήση!
- Μετά το άνοιγμα της πλαστικής συσκευασίας, η εξέταση πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως ή εντός μίας ώρας.
- Η κακή όραση, η αχρωματοψία ή ο ανεπαρκής φωτισμός ενδέχεται να επηρεάσουν τη σωστή αξιολόγηση της εξέτασης.
- Όλα τα στοιχεία της εξέτασης μπορούν να απορριφθούν στα οικιακά απορρίμματα.

* Ψευδώς αρνητικό = προβάλλεται ένα ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα εξέτασης, παρόλο που το πραγματικό αποτέλεσμα είναι θετικό.

Υλικά

- 1 κασέτα εξέτασης σε πλαστική συσκευασία
- 1 πιπίετα
- 1 δοχείο με ρυθμιστικό διάλυμα αραιώσης δείγματος
- 2 αυτόματες βελόνες (1 ανταλλακτικό) με αποστειρωμένο νυστέρι για τη λήψη του δείγματος αίματος



- 1 γυάλινο τριχοειδές σωληνάριο σε προστατευτικό δοχείο
- 1 ταμπόν αλκοόλης



- 1 ταμπότο



- 1 δελτίο οδηγιών χρήσης

Επεξήγηση συμβόλων

Λαμβάνετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης	Διαγνωστικό σύστημα In-vitro (Εξωτερική χρήση)	Ημερομηνία λήξης (βλ. εκτύπωση στη συσκευασία)
Αποθηκεύετε σε θερμοκρασία 10 °C – 27 °C σε ξηρό μέρος. Μην καταψύχετε.	Το περιεχόμενο επαρκεί για 1 εξέταση	Μίας χρήσης
Κατασκευαστής	Αποστείρωση με αιθυλενοξειδίο	Κωδικός παρτίδας (βλ. εκτύπωση στη συσκευασία)
Χρόνος αντίδρασης στην κασέτα εξέτασης	Γρήγορη εξέταση για προσωπική χρήση	

NanoRepro AG
Untergasse 8
D-35037 Marburg



Διάρθρωση:
GR – PAUL HARTMANN Hellas A.E.
16674 Glyfada/Athina
info@gr.hartmann.info

Πρόληψη διαταραχών του στομάχου Γρήγορη εξέταση για προσωπική χρήση Διεξαγωγή εξέτασης:

- 1** • Τοποθετήστε τα στοιχεία της εξέτασης στο τραπέζι.
Μην ανοίξετε ακόμη την πλαστική συσκευασία.



- (1) Δοχείο με ρυθμιστικό διάλυμα αραιώσης δείγματος
- (2) Ταμπόν αλκοόλης
- (3) Αυτόματη βελόνα
- (4) Γυάλινο τριχοειδές σωληνάριο σε προστατευτικό δοχείο
- (5) Κασέτα εξέτασης σε πλαστική συσκευασία
- (6) Πιπέτα
- (7) Τσιρότο

Προετοιμασία


- Η κασέτα εξέτασης και το ρυθμιστικό διάλυμα αραιώσης δείγματος πρέπει να είναι σε θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν από την έναρξη της εξέτασης (15 °C έως 27 °C). Ανοίξτε το δοχείο με το ρυθμιστικό διάλυμα αραιώσης δείγματος αφαιρώντας το καπάκι και τοποθετήστε το όρθιο στο τραπέζι.




- Ξεβιδώστε το γκρι κάλυμμα μιας αυτόματης βελόνας (3) μέχρι να χαλαρώσει. Κατόπιν αυτού, περιστρέψτε το άλλες 2 φορές.
- Μαλάξτε το άκρο του δείκτη και καθαρίστε το με το ταμπόν αλκοόλης (2). Περιμένετε να στεγνώσει το δάκτυλο.
- Πιέστε τη βελόνα με το στρογγυλό στόμιο στο πλευρικό τμήμα του ακροδάκτυλου (α) και πατήστε τη σκανδάλη (β).



- Ανοίξτε το προστατευτικό δοχείο (4) και αφαιρέστε με προσοχή το γυάλινο τριχοειδές σωληνάριο.
- Πιέστε μια σταγόνα αίματος από το ακροδάκτυλο.
- Κρατήστε το γυάλινο τριχοειδές σωληνάριο οριζόντια στη σταγόνα αίματος μέχρι να πληρωθεί εντελώς.
- Χρησιμοποιήστε το συνοδευτικό τσιρότο (7), εάν χρειάζεται.

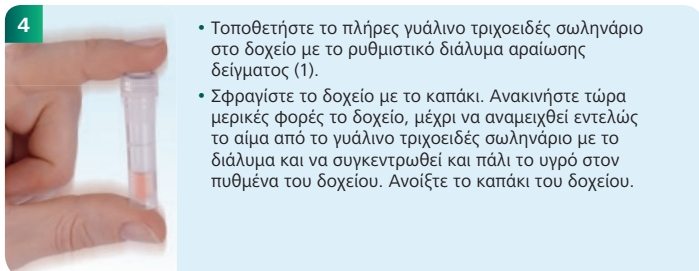

- Τοποθετήστε το πλήρες γυάλινο τριχοειδές σωληνάριο στο δοχείο με το ρυθμιστικό διάλυμα αραιώσης δείγματος (1).
- Σφραγίστε το δοχείο με το καπάκι. Ανακινήστε τώρα μερικές φορές το δοχείο, μέχρι να αναμιχθεί εντελώς το αίμα από το γυάλινο τριχοειδές σωληνάριο με το διάλυμα και να συγκεντρωθεί και πάλι το υγρό στον πυθμένα του δοχείου. Ανοίξτε το καπάκι του δοχείου.

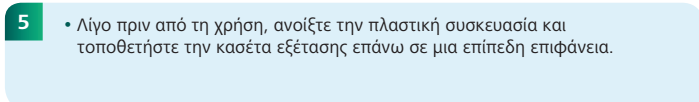


- Λίγο πριν από τη χρήση, ανοίξτε την πλαστική συσκευασία και τοποθετήστε την κασέτα εξέτασης επάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια.



- Αντλήστε με την πιπέτα (6) μερικές σταγόνες του αραιωμένου δείγματος.
- Με τη γεμάτη πιπέτα (6) ρίξτε 3 σταγόνες στο στρογγυλό πεδίο εφαρμογής (5) της κασέτας εξέτασης (5). **Φροντίστε να μην μεταφερθεί καθόλου υγρό στο παράθυρο αποτελέσματος (T) ή (C).** Αφού τοποθετήσετε τις σταγόνες, δεν πρέπει να αγγίξετε ή να μετακινήσετε πλέον την κασέτα εξέτασης.
- **Μετά την προσθήκη των 3 σταγόνων, ελέγξτε το αποτέλεσμα ύστερα από ακριβώς 10 λεπτά.**

Για την αξιολόγηση του αποτελέσματος, προσδιορίστε κατ' αρχάς αν στο παράθυρο εξέτασης φαίνεται μια γραμμή στο πεδίο (C). Δεν έχει σημασία πόσο έντονη ή αχνή είναι η γραμμή ελέγχου.


Θετικό αποτέλεσμα

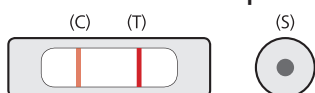

Το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι **θετικό**, όταν εμφανίζεται μία ανοιχτή έως σκούρα κόκκινη **γραμμή στο πεδίο ελέγχου (C)** και φαίνεται μία ανοιχτή έως σκούρα κόκκινη **γραμμή στο πεδίο εξέτασης (T)**.

Το αποτέλεσμα της εξέτασης συνεπάγεται ότι στο δείγμα του αίματός σας ανιχνεύονται αντισώματα IgG, τα οποία σχετίζονται με το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Ο προσδιορισμός αυτών των αντισωμάτων είναι με υψηλές πιθανότητες ενδεικτικός για μια υφιστάμενη ή πρόσφατη λοίμωξη από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Για την οριστική διάγνωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον ιατρό σας.


Αρνητικό αποτέλεσμα

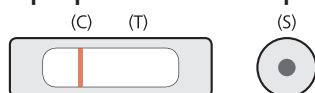

Το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι **αρνητικό**, όταν εμφανίζεται μία ανοιχτή έως σκούρα κόκκινη **γραμμή στο πεδίο ελέγχου (C)** και δεν φαίνεται **καμία κόκκινη γραμμή στο πεδίο εξέτασης (T)**.

Το αποτέλεσμα της εξέτασης συνεπάγεται ότι στο δείγμα του αίματός σας δεν ανιχνεύονται αντισώματα IgG, τα οποία σχετίζονται με το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Η λοίμωξη από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού μπορεί σχεδόν να αποκλεισθεί. Εάν οι γαστρεντερικές ενοχλήσεις και άλλα συμπτώματα επιμένουν, τότε είναι αναγκαία η περαιτέρω διαγνωστική διερεύνηση από τον ιατρό σας.

Μη έγκυρο αποτέλεσμα

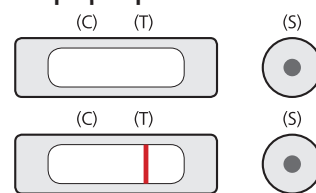

Εάν **δεν βλέπετε καμία γραμμή ελέγχου (C) ή μόνο μία γραμμή εξέτασης (T)**, τότε η εξέταση δεν έχει διεξαχθεί σωστά ή δεν είναι έγκυρη.

Ελέγξτε αν έχετε τηρησει επακριβώς όλες τις υποδείξεις των οδηγιών χρήσης. Διεξαγάγετε νέα εξέταση με νέο δείγμα αίματος.