

Ναρκωτικές ουσίες

Πολλαπλό σετ γρήγορης εξέτασης για την ανίχνευση 6 διαφορετικών ναρκωτικών ουσιών

5 min



Ευαισθησία
> 96 %



Ναρκωτικά - Εθιστικές ουσίες με παρενέργειες

Τα ναρκωτικά είναι ψυχοδραστικές ουσίες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά και τη διάθεση του ατόμου που τα λαμβάνει. Η λήψη μίας ή περισσότερων ναρκωτικών ουσιών συνδέεται ωστόσο με μη αμελητέους κινδύνους. Μακροπρόθεσμα αναμένονται δυσμενείς επιπτώσεις στη σωματική υγεία και ψυχοκοινωνικά προβλήματα ως συνέπεια ενός ενδεχόμενου εθισμού.

Περιγραφή εξέτασης: Πολλαπλή γρήγορη εξέταση ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών

Με την πολλαπλή γρήγορη εξέταση ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών και με τη χρήση ενός δείγματος ούρων, μπορούν να ανιχνευθούν γρήγορα και με ασφάλεια ενδείξεις κατάχρησης **αμφεταμινών, βενζοδιαζεπινών (ηρεμιστικά), κοκαΐνης, μαριχουάνας (THC), μεθαδόνης και οπιούχων**. Η εξέταση παρέχει πληροφορίες για τις ναρκωτικές ουσίες που καταναλώνονται.

Πόσο αξιόπιστη είναι η εξέταση Veroval®;

Η πολλαπλή γρήγορη εξέταση ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών σχεδιάστηκε με στόχο να καταστεί διαθέσιμη η ακρίβεια και η ασφάλεια της σύγχρονης διαγνωστικής και για τη χρήση κατ' οίκον. Η εξέταση είναι μια ανοσοχρωματογραφική μέθοδος ανάλυσης, που μπορεί να ανιχνεύει ναρκωτικές ουσίες ή τα προϊόντα αποδόμησης τους στα ούρα. **Η ευαισθησία που υπολογίζεται με μια μελέτη αξιολόγησης της απόδοσης υπερβαίνει το 96 %.**

Είναι πολύπλοκη η διεξαγωγή της εξέτασης;

Όχι: Το μόνο που χρειάζεστε είναι καθαρά, πλυμένα χέρια, ένα ρολόι, ένα δοχείο και μια επίπεδη επιφάνεια. Η ακριβής διαδικασία εξέτασης περιγράφεται στο οπισθοφύλλο.

Στοιχεία απόδοσης:

Η πολλαπλή γρήγορη εξέταση ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών μπορεί να ανιχνεύσει ταυτόχρονα τις ακόλουθες κατηγορίες ουσιών. Έχει βαθμονομηθεί με την κατάλληλη ευαισθησία (Cut-off) για κάθε ουσία:

Εξέταση	Συντομογραφία	Βαθμονομητής	Cut-off (ng/ml)	Ικανότητα ανίχνευσης στα ούρα από την τελευταία λήψη ¹
Αμφεταμίνη	AMP	D-Αμφεταμίνη	1.000	1 έως 3 ημέρες
Βενζοδιαζεπίνη	BZO	Οξαζεπάμη	300	Περιστασιακή λήψη: έως 3 ημέρες Τακτική λήψη: έως 6 εβδομάδες
Κοκαΐνη	COC	Βενζουλεγκονίνη	300	Η κοκαΐνη είναι ανιχνεύσιμη μόνο για μερικές ώρες και τα προϊόντα αποδόμησης για 2 έως 3 ημέρες
Μαριχουάνα	THC	11-nor-Δ9-THC-9 COOH	50	Περιστασιακή λήψη: 2 έως 4 ημέρες Τακτική λήψη: 2 έως 6 εβδομάδες
Μεθαδόνη	MET	Μεθαδόνη	300	2 έως 3 ημέρες
Οπιούχα	OPI	Μορφίνη	300	Έως 8 ώρες

Η πολλαπλή γρήγορη εξέταση ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, εκτός από τις ουσίες του βαθμονομητή, ανιχνεύει επίσης κι άλλα συναφή παράγωγα ή μεταβολίτες.

¹ Λάβετε υπόψη ότι αυτές είναι τιμές κατά προσέγγιση. Για την ικανότητα ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών στα ούρα, παίζουν ρόλο πολλοί μεμονωμένοι παράγοντες.

Σημαντική υπόδειξη:

Τα θετικά και ασαφή αποτελέσματα πρέπει να επιβεβαιώνονται με περαιτέρω αναλυτική μέθοδο.

²Ψευδώς θετικό = προβάλλεται ένα ψευδώς θετικό αποτέλεσμα εξέτασης, παρόλο που το πραγματικό αποτέλεσμα είναι αρνητικό.

www.veroval.gr

Υλικά

- 1 πλαστική συσκευασία με κοστέο πολλαπλών ταινιών εξέτασης και αφυγραντικό μέσο
- 1 φυλλάδιο οδηγιών χρήσης

Επεξήγηση συμβόλων

 Λαμβάνετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης	 Αποθηκεύετε σε θερμοκρασία +4 °C έως +30 °C σε ξηρό μέρος.	 Ημερομηνία λήξης (βλ. εκτύπωση στη συσκευασία)
 Το περιεχόμενο επαρκεί για 1 εξέταση		 Μίας χρήσης
 Κατασκευαστής		 Κωδικός παρτίδας (βλ. εκτύπωση στη συσκευασία)
 5 min Χρόνος αντίδρασης στις πολλαπλές ταινίες εξέτασης	 Γρήγορη εξέταση για προσωπική χρήση	

NanoRepro AG
Untergasse 8
D-35037 Marburg

Διεύθυνση:
GR – PAUL HARTMANN Hellas A.E.
16674 Glyfada/Athina
info@gr.hartmann.info

Ναρκωτικές ουσίες

Πολλαπλή γρήγορη εξέταση για προσωπική χρήση

Περιγραφή εξέτασης:

1


Προετοιμασία:
Η κασέτα εξέτασης μέσα στην πλαστική συσκευασία πρέπει να είναι σε θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν από την έναρξη της εξέτασης (15 °C έως 27 °C). Αφαιρέστε την εξέταση ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών από την πλαστική συσκευασία.

2

- Συλλέξτε φρέσκα ούρα σε ένα δοχείο. Αν παρατηρήσετε θολότητα στα ούρα, περιμένετε μέχρι να διαυγάσουν.
- Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι και εμβάψιτε την εξέταση ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών στα ούρα για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα μέχρι τη σχετική σήμανση. Βεβαιωθείτε ότι η κασέτα εξέτασης βυθίζεται μόνο έως το κάτω άκρο.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν αγγίζετε το παράθυρο αξιολόγησης και δεν μεταφέρετε ούρα επάνω του.

3

- Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα στην κασέτα εξέτασης και τοποθετήστε την επάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια. Μην αγγίζετε ή μετακινείτε πλέον την κασέτα εξέτασης. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστούν οι χρωματιστές γραμμές στο πεδίο αντίδρασης.

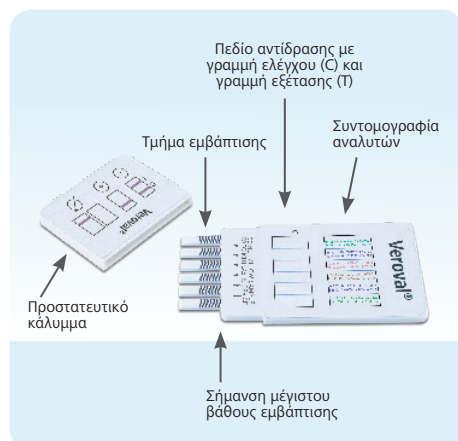


4

- Ελέγξτε το αποτέλεσμα ύστερα από περίπου 5 λεπτά, αλλά όχι περισσότερο από 10 λεπτά.
- Η εξέταση ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών πρέπει να αξιολογηθεί υπό καλές συνθήκες φωτισμού περιβάλλοντος, ώστε να μπορούν να ανιχνευθούν ακόμα και οι αχνές χρωματιστές γραμμές.

Για την αξιολόγηση του αποτελέσματος, προσδιορίστε κατ' αρχάς αν στο πεδίο αντίδρασης κάτω από την ένδειξη (C) φαίνεται μια γραμμή. Δεν έχει σημασία πόσο έντονη ή αχνή είναι η γραμμή ελέγχου. Κάθε ταινία εξέτασης πρέπει να αξιολογηθεί μεμονωμένα.

Αρνητικό αποτέλεσμα

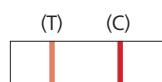

Όταν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, δηλαδή όταν το δείγμα ούρων δεν περιέχει ναρκωτικές ουσίες, στα πεδία αντίδρασης εμφανίζονται γραμμές εξέτασης ανοικτού έως σκούρου κόκκινου χρώματος (T) και γραμμές ελέγχου ανοικτού έως σκούρου κόκκινου χρώματος (C).

Η συγκέντρωση των συγκεκριμένων ναρκωτικών ουσιών (ή των παραγώγων τους) στο δείγμα βρίσκεται κάτω από την οριακή τιμή.

Υποδείξεις και περιορισμοί:

- Η πολλαπλή γρήγορη εξέταση δεν αποτελεί ιατρικό προϊόν και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαγνωστικούς σκοπούς.
- Η εξέταση είναι θετική μόνον εφόσον δεν εμφανίζεται **καμία γραμμή εξέτασης (T)**.
- Η εξέταση μπορεί να επηρεαστεί από σκόπιμα εισαχθέντα μέσα αλλοίωσης. Σε περίπτωση υποψίας αλλοίωσης, η εξέταση πρέπει να επαναληφθεί με νέο δείγμα ούρων.
- Το σετ αυτοεξέτασης δεν μπορεί να κάνει διάκριση μεταξύ ναρκωτικών ουσιών και συναφών συνταγογραφούμενων φαρμάκων.
- Παρόλο που η αλλοίωση της εξέτασης από μια ευρεία ποικιλία ουσιών μπορεί να αποκλειστεί, δεν μπορεί να αποκλειστεί η αλλοίωση του αποτελέσματος της εξέτασης από άλλες ουσίες, καθώς και διαδικαστικά ή τεχνικά σφάλματα.


Θετικό αποτέλεσμα



Όταν το αποτέλεσμα είναι θετικό, στα πεδία αντίδρασης **δεν εμφανίζονται καθόλου γραμμές εξέτασης (T)**, παρά μόνον **γραμμές ελέγχου ανοικτού έως σκούρου κόκκινου χρώματος (C)**.

Η συγκέντρωση των συγκεκριμένων ναρκωτικών ουσιών (ή των παραγώγων τους) στο δείγμα βρίσκεται πάνω από την οριακή τιμή. Η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το επίπεδο της συγκέντρωσης και, συνεπώς, τη σοβαρότητα της κατανάλωσης, δεν είναι εφικτή.

Μη έγκυρο αποτέλεσμα

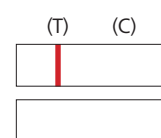

Αν στα πεδία αντίδρασης βλέπετε **μόνο γραμμές εξέτασης (T)**, δεν βλέπετε **καμία γραμμή ελέγχου (C)** ή δεν βλέπετε γενικά **καμία γραμμή**, τότε το αποτέλεσμα της εξέτασης δεν είναι έγκυρο.

Ελέγξτε αν έχετε τηρήσει επακριβώς όλες τις υποδείξεις των οδηγιών χρήσης. Διεξάγετε νέα εξέταση με νέο δείγμα ούρων.