

## Drugs

Multi-sneltest voor het aantonen van 6 verschillende drugs

5 min



Sensitiviteit  
> 96 %



### Drugs – Verslavende middelen met bijwerkingen

Drugs zijn psychoactieve stoffen die het gedrag en de stemming van de betreffende consument beïnvloeden. Het consumeren van een of meerdere drugs gaat echter met aanzienlijke gevaren gepaard. Op lange termijn is een negatieve invloed op de lichamelijke gezondheid alsook psychosociale problematiek als gevolg van een eventuele verslaving te verwachten.

### Met de drugs multi-sneltest weet u waar u aan toe bent

Met de drugs multi-sneltest kunnen aan de hand van een urinemonster snel en eenduidig tekenen van het gebruik van **amfetaminen, benzodiazepinen ('minor tranquilizers'), cocaïne, marihuana (THC), methadon en opiaten** worden aangetoond. De test toont aan welke drugs zijn geconsumeerd.

### Hoe betrouwbaar is de Veroval®-test?

De drugs multi-sneltest is ontwikkeld met als doel de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de moderne diagnostiek beschikbaar te maken voor privégebruik thuis. Bij deze test gaat het om een immunochromatografische analyse, waarmee drugs en/of de afbraakproducten ervan in de urine kunnen worden aangetoond. **Een prestatie-evaluatieonderzoek heeft een sensitiviteit van meer dan 96% aangetoond.**

### Is de test ingewikkeld om uit te voeren?

Nee: het enige wat u nodig hebt, zijn schoon gewassen handen, een klok, een beker en een vlakke ondergrond. Het precieze verloop van de test kunt u op de achterzijde terugvinden.

### Prestatiegegevens:

De drugs multi-sneltest kan tegelijkertijd de volgende klassen van stoffen aantonen. Deze is daarbij telkens met de ten onrechte sensitiviteit (cut-off) op een representatieve stof gekalibreerd:

Test	Afkorting	Kalibrator	Cut-off (ng/ml)	Aantoonbaarheid in de urine sinds het laatste gebruik <sup>1</sup>
Amfetamine	AMP	D-amfetamine	1.000	1 tot 3 dagen
Benzodiazepine	BZO	Oxazepam	300	Incidenteel gebruik: tot 3 dagen Regelmatig gebruik: tot 6 weken
Cocaïne	COC	Benzoylcegonine	300	Cocaïne is slechts enkele uren aantoonbaar, het afbraakproduct 2 tot 3 dagen
Marihuana	THC	11-nor-Δ9-THC-9 COOH	50	Incidenteel gebruik: 2 tot 4 dagen Langdurig gebruik: 2 tot 6 weken
Methadon	MET	Methadon	300	2 tot 3 dagen
Opiaten	OPI	Morfine	300	Tot 8 uur

De drugs multi-sneltest toont daarnaast behalve de kalibrator-stoffen ook andere aanverwante derivaten of metabolieten aan.

<sup>1</sup> Denk erom dat het hier om indicatieve richtwaarden gaat. Bij de aantoonbaarheid van drugs in de urine spelen veel individuele factoren een rol.

### Belangrijk:

**Positieve en onduidelijke resultaten dienen met een andere analytische methode te worden bevestigd.**

<sup>2</sup>Fout-positief = het getoonde resultaat is verkeerdelijk positief, terwijl het eigenlijke resultaat negatief is.

[www.veroval.nl](http://www.veroval.nl)

### Materiaal

- 1 aluminium verpakking met teststrip en droogmiddel
- 1 gebruiksaanwijzing

### Verklaring van symbolen

 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing	 Droog bewaren bij +4 °C - +30 °C.	 Te gebruiken tot (zie verpakking)
 Inhoud voldoende voor 1 test		 Niet hergebruiken
 Fabrikant		 Lotnummer (zie verpakking)
 Reactietijd in de multi-teststrip		 Sneltest voor eigen gebruik

NanoRepro AG  
Untergasse 8  
D-35037 Marburg

### Distributeur:

NL – PAUL HARTMANN B.V.  
Kerkenbos 11-03d  
6546 BC Nijmegen  
[algemeen@hartmann.info](mailto:algemeen@hartmann.info)

### Drugs

## Multi-sneltest voor eigen gebruik

### Zo voert u de test uit:

1



#### Vorbereiding

Breng de testcassette in de aluminium verpakking op kamertemperatuur alvorens de test te beginnen (15 °C tot 27 °C). Haal de drugstest uit de aluminium verpakking.

2




- Vang verse urine op in een beker. Bij vertroebelingen in de urine moet u wachten totdat deze neerslaan.
- Verwijder de afsluitdop en dompel de drugstest gedurende minimaal 10 seconden tot aan de markering in de urine. Zorg ervoor dat de testcassette uitsluitend tot aan de onderste rand wordt ondergedompeld.
- Let erop dat u het evaluatievenster niet aanraakt en dat er geen urine op komt.

3



- Doe de afsluitdop weer op de testcassette en leg deze op een vlak oppervlak. Raak de testcassette niet meer aan en beweeg deze niet meer. Wacht totdat de gekleurde lijnen in het reactieveld verschijnen.

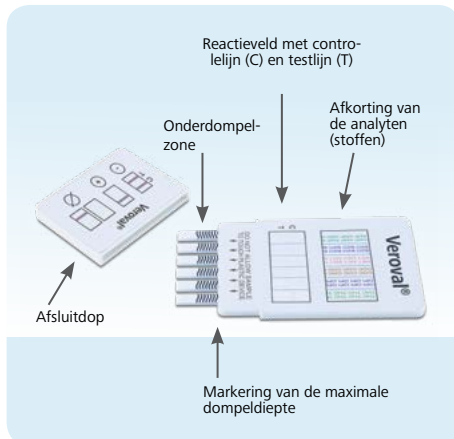


4

- Lees het resultaat na ong. 5 minuten af, maar niet later dan 10 minuten.
- De drugstest moet bij goed licht worden geëvalueerd, zodat ook licht gekleurde lijnen kunnen worden onderscheiden.

Om het resultaat te beoordelen, moet u eerst controleren of er een lijn zichtbaar is in het reactieveld onder (C). Het maakt niet uit hoe duidelijk of onduidelijk de controlelijn zichtbaar is. Elke testlijn moet individueel worden beoordeeld.

#### Negatief resultaat

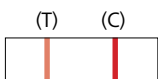

Bij een negatief resultaat, dus bij een **drugsvrij** urinemonster, verschijnen in de reactievelden licht- tot donkerrode testlijnen (T) en licht- tot donkerrode controlelijnen (C).

De concentratie van deze specifieke drugs (of hun derivaten) in het monster ligt onder de grenswaarde.


#### Positief resultaat



Bij een **positief resultaat** verschijnen in de reactievelden **geen testlijnen (T)** en alleen **licht- tot donkerrode controlelijnen (C)**.

De concentratie van deze specifieke drugs (of hun derivaten) in het monster ligt boven de grenswaarde. Conclusies over de hoogte van de concentratie en de overeenkomstige ernst van het gebruik zijn niet mogelijk.

#### Ongeldig resultaat

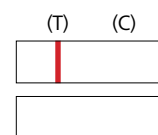

Als u in de reactievelden **uitsluitend testlijnen (T)**, **geen controlelijnen (C)** of **helemaal geen lijnen** ziet, is de **test ongeldig**.

Controleer of u alle stappen in de gebruiksaanwijzing correct hebt doorlopen. Voer nogmaals een test uit met een nieuw urinemonster.

#### Aanwijzingen en beperkingen:

- De multi-sneltest is geen medisch product en mag daarom niet voor diagnostische doeleinden worden gebruikt.
- Uitsluitend wanneer er daadwerkelijk **geen testlijn (T)** zichtbaar is, is de test positief.
- Opzettelijk gebruikte vervalsingsmiddelen kunnen de test beïnvloeden. In het geval van een vermoedelijke vervalsing dient de test met een nieuw urinemonster te worden herhaald.
- De zelftest kan geen onderscheid maken tussen drugsmisbruik en het gebruik van verwante medicamenten die uitsluitend op voorschrift verkrijgbaar zijn.
- Hoewel het beïnvloeden van de test door een uitgebreide reeks stoffen kan worden uitgesloten, kan niet worden uitgesloten dat andere stoffen en technische fouten of fouten die samenhangen met de uitvoering van de test het testresultaat vervalsen.